

IONPA

INŠTRUKCIE



Ďakujeme, že ste si vybrali značku IONICKISS.

Zaviazali sme sa ponúkať produkty, ktoré čo možno najefektívnejšie čistia zuby a pomáhajú tak chrániť zdravie ústnej dutiny. Táto ionizačná zubná kefka účinne redukuje hromadenie zubného povlaku a odstraňuje škvarky od kávy, čaju a fajčenia.


Kefka tak zohráva dôležitú úlohu aj v prevencii zápalu dasien.

Použitie zubnej kefky IONPA HOME prináša úplne nový zážitok pri čistení zubov. Prosím, prečítajte si pozorne tento inštrukčný manuál pred prvým použitím a majte tieto inštrukcie poruke.

Dôležité bezpečnostné upozornenia

1. Výrobok násilím neotvárajte, neopravujte ani nijako neupravujte.
2. S výrobkom nebúchajte ani ho nenechajte spadnúť. Ak sa zdá byť výrobok poškodený, nepoužívajte ho.
3. Pred nabíjaním skontrolujte, že sa elektrické napätie v sieti zhoduje s odporúčaným napäťom nabíjačky.
4. Používajte tento výrobok len s originálnymi hlavicami IONICKISS a originálnou nabíjačkou.
5. Použiteľ výrobku konzultujte so svojim lekárom, ak ste v minulosti podstúpili chirurgický zárok v ústnej dutine.
6. Použitie zubných kefiek IONICKISS je bezpečné pre všetkých. Avšak, ak používate kardiomagnetický alebo podobný zariadenie, prosíme, konzultujte použitie kefky so svojím lekárom.
7. Tento výrobok je určený iba na čistenie zubov, dasien a jazyka.
8. Deti a osoby so zníženými fyzičkými a zmyslovými schopnosťami alebo s nedostatom skúseností a znalostí musia byť poučené, ako bezpečne zoobchádzať so sonickou kefkou a musia rozumieť prípadným nebezpečenstvám.
9. Nepoužívajte nabíjaciu základňu vonku alebo pri vysokých teplotách. Neponárajte základňu alebo telo kefky do vody alebo inej kvapaliny. Ak napájacie zdroj nepoužívate alebo sa ho chystáte čistiť, odpojte ho zo siete. Nečistite prosím prostriedkami určenými na starostlivosť o vlasy (gely, oleje a pod.), mydlem na ruky alebo zásaditými čistiacimi prostriedkami. Mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchu výrobku.
10. Deti by mali výrobok používať pod dohľadom, aby bola zaistená správna manipulácia.
11. Neskladujte na slnku a / alebo vo vysokých teplotách.

1 Názov komponentu

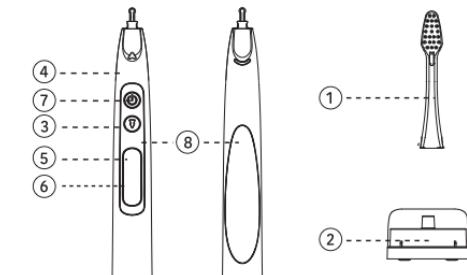

Informácie o produkte

Názov produktu	Ionizačná - sonická zubná kefka	Model	DP-111
Výkon (kefka)	1.2 W	Napätie (kefka)	DC 3.7 V
Príkon (kefka)	1.5 W	Napätie (nabíjačka)	5 V
Doba potrebná na dobicie	Približne 4 hodiny	Kapacita batérie	260 mAh
Operatívny štandard	GB4706.59-2008	Pôvod	Japonsko
Použitie batérie pri plnom nabiti	100 minut	Váha	cca 85 g (vrátane hlavice)
Veľkosť rukoväte	Približne 2,54 cm x 2,54 cm x 22,86 cm		
Frekvencia	Približne 22 000 kmitov / min. (Režim Clean) Približne 26 000 kmitov / min. (Režim White +)		

- ① Hlavica kefky
- ② Nabíjacia stanica
- ③ Tlačidlo výberu režimu čistenia
- ④ Rukoväť
- ⑤ Panel zobrazujúci režim čistenia
- ⑥ Kontrolka LED napájania
- ⑦ Tlačidlo zapnutia / vypnutia
- ⑧ Kovová dotyková plocha


2 Použitie IONPA HOME

- Nasadte výmennú hlávici pevne na oceľovú tyčinku rukoväti kefky.
- Navlhčenou rukou uchopte rukoväť v mieste kovového pásika. Tým sa spustí tok záporých iónov, vďaka ktorému pracuje sonická kefka IONPA HOME ešte efektívnejšie.
- Navlhčte hlávici a ak chcete, naneste malé množstvo Zubnej pasty. (Obvykle stačí polovica bežné používaného množstva Zubnej pasty).
- Umiestnite štetinky kefky pod miernym uhlom k líniu dasien.
- Vyberte si režim čistenia pomocou tlačidla na to určeného. Zvolený režim sa zobrazí na displeji. Vyberajte zo nasledujúcich režimov:
 - Clean: približne 22 000 kmitov za minútu. Režim pre každodenné čistenie, pomocou ktorého udržujete celú ústnu dutinu perfektné čistú.
 - White +: približne 26 000 kmitov za minútu. Režim určený pre odstránenie povrchových skŕní zo zubov.
 - Gumcare: Okrem čistenia zubov poskytuje tento režim tiež jemnú masáž dasien.
 - HiClean: Tento režim je o niečo dôraznejší, aby sa štetinky dostali k povlaku v medzižubných priestoroch.
- Jemným pohybom hlávice pomaly prechádzajte cez zuby sem a tam. Striedajte čistenie predných, zadných a žuvacích ploch zubov, pričom každému povrchu venujte aspoň 10 sekúnd. Uistite sa, že štetinky dosahujú medzi zubami a jemne masírujú dasná. Na štetinky nevyvíjajte príliš veľký tlak, väčšinu práce odviedie sonický pohyb hlávice.

Indikátor výmeny hlávicy

Ak sa rozhodnete indikátor výmeny hlávicy nevyužiť:

Indikátor výmeny hlávicy je z výroby aktívny. Ak sa rozhodnete indikátor nepoužívať, najprv sa uistite, že je zariadenie vypnuté a stlačením multifunkčného tlačidla na viac ako 2 sekundy indikátor vypnite.

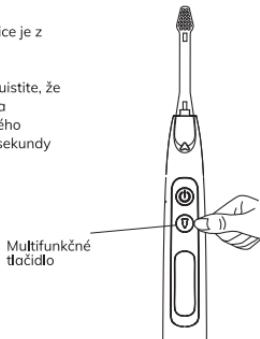


Ako resetovať indikátor výmeny hlávicy:

(Zmiešne ikona hlávica kefky)

Ak je indikátor aktivovaný, po 180 minútach používania sa zobrází ikona hlávica kefky. Ikona bude blikat po dobu 30 sekúnd aj po vypnutí zariadenia.

Ak chcete resetovať výrobok, vypnite ho a po dobu 2 sekúnd držte súčasne vypínač aj multifunkčné tlačidlo. Indikátor nebude resetovaný len výmenou hlávice kefky.

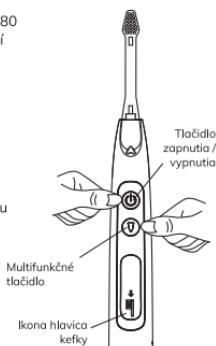

3 Vlastnosti

- Motorček v kefke IONPA HOME zabezpečuje 26 000 kmitov za minútu s amplitúdou (pokrytím plochy) 6 mm na dosiahnutie účinného vycištenia zubov.
- Telo kefky má ergonomický tvar s mäkkou povrchovou úpravou pre ľahkú a pohodlnú účop.
- Tačidlo kefky je vodeodolné.
- Inteligentný časovač každých 30 sekúnd sa pozastaví, aby užívateľovi pripomiel odporúcaný čas čistenia každého sektora ústnej dutiny.
- Keď kefky možno ponoriť do vody až do hĺbky jedného metra a to až po dobu 30 minút, bez toho aby sa výrobok poškodil. Pre každodenné čistenie teda výrobok spĺňa parameter vodeodolnosti úplne dostačné.
- Výrobok obsahuje bezpečnú a odolnú litiovú batériu. Plne nabité batériu vydrží až 25 dní (použitie po dobu 2 minút, dvakrát denne) a následne používateľa upozorní na nízku úrovňu nabítia.
- Ponúka 4 režimy čistenia - "Clean", "White +", "Gumcare" a "HiClean" na zabezpečenie rôznej úrovne čistenia zubov a / alebo dasien.

Funkcie výrobku boli prednastavené z výroby a pred distribúciou skontrolované.

4 Výmena hlávice kefky

Výmena hlávice:



Otočte hlávicou 90 stupňov tak, ako je zobrazené na obrázku vľavo a potom vyušte z rukoväťi.

Nasadenie náhradnej hlávice:

Zasuňte hláviciu na kovovú tyčinku až do zaväznutia.



5 Dobíjanie výrobku

1. Vďaka indukčnému nabíjaniu stačí umiestniť zubnú kefkú na dobíjaciu základňu, ktorá je pripojená k elektrickej sieti.

2. LED kontrolka indikuje, že sa jednotka nabíja. Po tom, čo sa kefka plne nabije, táto kontrolka zhasne. Celý proces by mal trvať maximálne štyri hodiny.

Tlačidlo voľby režimu je počas nabíjania deaktivované.

Ak umiestnete spúštený výrobok na dobíjaciu základňu, vypne sa a prejde do režimu nabíjania.

6 Čistenie výrobku

1. Rukoväť

Odstraňte hláviciu kefky z rukoväťi. Mäkkou vlnkou handričku utrite celú plochu rukovätie a kovovú tyčinku a nechajte uschnúť na vzduchu.

2. Nabíjací stojan

Čistite pomocou mäkkej vlnkej handričky a nechajte uschnúť na vzduchu.
Neponárajte do vody.

3. Hlávica kefky

Po každom použití hlávici dôkladne opláchnite. Štetinky nestláčajte ani sa ich nesnažte vytiahnuť, aby nedošlo k ich poškodeniu.

Odporúčame meniť hlávici Zubnej kefky každé 2 mesiace. Nadmerne používanie hlávice môže hromadiť bakterie a ich účinnosť čistenia sa v priebehu času zníži.

Po 30 dňoch používania sa rozsvieti kontrolka pre výmenu hlávicy. Táto kontrolka má iba informatívny charakter a rozsvieti sa s časovým predstihom tak, aby ste mali dostať čas zabezpečiť si novú hlávici.