

Použitie zubných kefiek IONICKISS je bezpečné pre všetkých. Avšak, ak používate kardiostimulátor či podobné zariadenie, prosíme, konzultujte použitie kefky so svojím lekárom.

48%

Klinicky preukázané - IONICKISS odstraňuje zubný povlak až o 48% efektívnejšie než ostatné manuálne zubné kefky



Výmenné hlavice - pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov vymieňajte náhradnú hlavicu každé dva až tri mesiace.



3V batéria - lítiová batéria zabudovaná do tela kefky vydrží až jeden rok.



Vyrobené v Japonsku - synonymum pre kvalitu a inováciu. Kečka IONICKISS KIDS je oficiálne certifikovaná v Tokijskom technologickom inštitúte.



Ionizačná technológia - záporne nabité ióny narušujú väzbu medzi zubom a zubným povlakom.




Nie je potrebná žiadna zubná pasta - prvá zubná kečka, ktorú možno úspešne používať aj bez zubnej pasty.

Časti zubnej kefky

- 1 Výmenná hlavica
- 2 Kovová tyčinka na prenos iónov
- 3 Indikátor stavu batérie.
- 4 Tlačidlo pre kontrolu stavu batérie
- 5 3V batéria zabudovaná vo vodeodolnom obale.
- 6 Vodivý pásik z termoplastického kompozitu

IONICKISS™
アイオニック

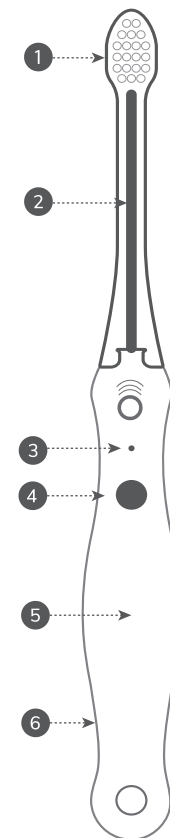

**Ionic
technology**

NÁZOV: Manuálna ionizačná zubná kečka IONICKISS KIDS s výmennými hlavícami

POPIS: Manuálna ionizačná kečka so zabudovanou batériou a jednou výmennou hlavicom.

DÁTUM EXPIRÁCIE: neobmedzené

UPOZORNENIE: Uchovávajúce mimo dosahu detí mladších ako tri roky.

VÝROBCA:


IONIC CORPORATION
914-1 Nazukari, Nagareyama,
Chiba, 270-0145 Japan

DISTRIBÚTOR:

Ortus Health s.r.o.,
IČ 08754039, Česká republika



Ako to funguje?

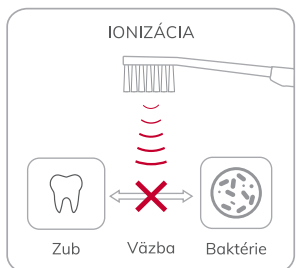

Ako IONICKISS odstraňuje zubný povlak?

Zubný povlak je na zuboch prichytený kladnými iónmi v slinách. Záporne ióny zo zubnej kefky IONICKISS účinne narušujú tieto väzby medzi zubami a povlakom a umožňujú tak ľahké odstránenie povlaku pohybom kefky.



Ionizačná technológia

48%

Efektívnejšie




Vyrobené v Japonsku

Ako sa používa?

Používanie zubnej kefky IONICKISS je veľmi jednoduché.

Pri držaní kefky sa dotýkajte navlhčeným prstom, alebo dlaňou kovového pásiku.

A vyčistíte si poriadne zuby.

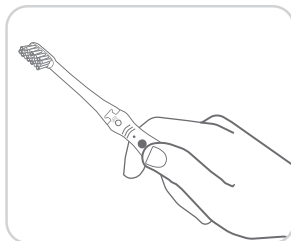

Ako si najlepšie vyčistiť zuby?

Zakaždým opakujte to isté. Zuby čistíte najprv zvonku, následne z vnútornej strany. Začnite spodnou časťou a potom sa presuňte na tú hornú.

Na vonkajšej strane dasien priložte štetiny zubnej kefky proti zubom v miernom uhle k línii dasien a čistíte jemnými krátkymi krúživými pohybmi. Pri každom zube vykonajte 5-10 opakovaní.

Pre vnútorné časti používajte rovnakú techniku a pohybujte sa postupne z jednej stoličky na druhú.


Pokiaľ ide o žuvacie plochy, začnite čistiť na jednej strane stoličiek a pomaly pohybujte vpred v krátkych pohyboch tam a späť na druhú stranu stoličiek.

Celý proces by mal trvať približne 3 až 6 minút.

Je klinicky dokázané, že manuálne kefky IONICKISS odstraňujú zubný povlak až o 48% efektívnejšie a to až bez použitia zubnej pasty.

Nie je potrebné tlačiť. Čistíte zuby jemne.

Ako skontrolovať stav batérie?

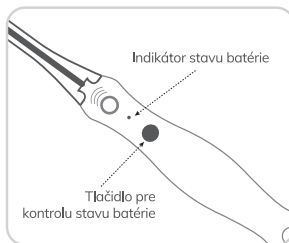


Ak chcete skontrolovať stav batérie, stlačte kontrolné tlačidlo.

Zelené svetlo signalizuje, že vaša zubná kefka je pripravená na použitie.

Lítiová batéria je integrovaná v tele zubnej kefky a vydrží až jeden rok.


Ako vymeniť náhradnú hlavicu?

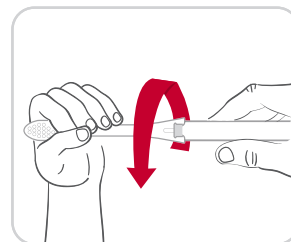

Držte pevne rukoväť kefky.

Otočte náhradnú hlavicu o 90 stupňov a potiahnite ju.

Ako nasadiť výmennou hlavicu?

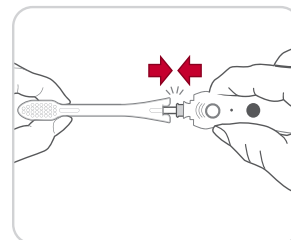

Nasadte výmennú hlavicu na kovovú tyčinku a zacvaknite ju do kefky.

* Existujú rôzne typy výmenných hlavíc IONICKISS. Podrobnosti nájdete na ionickiss.sk